

SMILE

Portabel larmklocka

Användarmanual

NE41 14002-01 v1.0

Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla sina produkter eller ändra i innehållet utan att meddela personer eller organisationer om sådana ändringar.

NEAT Electronics AB är inte ansvarigt för data- eller inkomstförlust eller någon som helst påföljande skada.

För mer information, detaljer eller beskrivningar, besök vår hemsida:

www.neat-group.com/se

© NEAT Electronics AB 2015

Alla rättigheter förbehållna.

Dokumentnummer: NE41 14002-01 v1.0

Revisionsdatum: 2016-03-03

Kontakt

NEAT Electronics AB

Varuvägen 2

24642 Löddeköpinge

Tel: 046 707065

Fax: 046 707087

www.neat-group.com/se

infosweden@neat-group.com

EU Notes

Vid användande följer enheten kraven i tillämpliga EU-direktiv och bestämmelser.

En fullständigt "Försäkran Om Överensstämmelse" (Declaration of Conformity) kan vid begäran erhållas från adressen nedan (se Kontakt).



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ulrik Lundberg".

Ulrik Lundberg

VD

Innehåll

Avsedd användning

Generell funktion

SMILE Delar

Handhavande

Montering

Montera/lossa PIN/halsbandet

Montera armbandet

Montera CLIP

Montera HAPA

Byta ut topskalet

Montera Berlock

Viktigt

Användning

Rengöring

Säkerhetsinfo

Återvinning

Tekniska Data

Avsedd användning


SMILE är avsedd att användas i hemmet eller vårdboende för att skapa trygghet genom att ge möjlighet att skicka ett larm.

Generell funktion

SMILE är en portabel larmklocka som måste anslutas till en mottagare (t.ex. NOVO Trygghetstelefon, TRES2G Portabel Larmmottagare, D-TECT och D-SERVER system) för att kunna skicka larm.

Larm skickas genom att trycka på den röda larmknappen och sändningen bekräftas med grönt sken i tre sekunder.

SMILE Delar

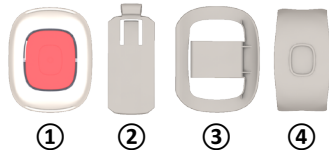

Benämning

①	SMILE Enhet (med röd larmknapp)
②	SMILE PIN (med klack och halsband)
③	SMILE CLIP (Tillbehör)
④	SMILE HAPA Handikappanpassning (Tillbehör)
	SMILE Armband (visas ej här)
	SMILE BERLOCK (visas ej här)


SMILE-enheten, armbandet och PIN/halsband ingår i ett Standard SMILE Kit. CLIP, HAPA och BERLOCK kan fås som extra tillbehör.

Handhavande

Tryck på den röda larmknappen för att skicka ett larm.

Montering

Montera/lossa PIN/halsbandet

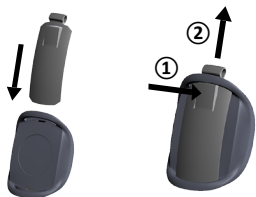

Trä PIN genom hålen och tryck ner tills klacken klickar på plats.

Lossa PIN genom att trycka på klacken ① och sedan dra upp ②.

Montera armbandet

Trä armbandet genom hålen på enheten och fäst därefter på armen.

Montera CLIP



Fixera CLIP på baksidan av SMILE och montera därefter PIN genom hålen på SMILE tills klacken klickar på plats.

För att avlägsna CLIP, tryck på PIN klacken och lossa PIN.

Montera HAPA



Tryck mildt, men bestämt fast HAPA på SMILE.

För att lossa HAPA, använd ett tunt blad (t.ex. smörkniv) och bänd försiktigt upp ena kortsidan och lossa från SMILE.



Använd inte våld, då kan krokarna gå sönder.

Byta ut topskalet

SMILE är designad så att topskalet kan bytas ut. Lossa topskalet genom att försiktigt dra utåt i hålen för armbandet.



Fäst det nya topskalet genom att trycka fast det till ett diskrent "klick" hörs.



Ett borttaget topskal är förbrukat!

Montera Berlock

BERLOCK monteras på samma sätt som CLIP.

För att ta bort BERLOCK, stick ner ett gem i hålet närmast halsbandet för att lossa PIN.

Viktigt

Användning

- Använd endast originaldelar.
- Håll borta från damm, fukt och smuts.
- Kasta, knacka, vrid eller skaka inte produkten.
- Hetta inte upp enheten eller använd den nära öppen eld.
- Enheten får inte övermålas.
- Kontakta en NEAT återförsäljare för reparation.

Rengöring

- Alla delar i produkt-kitet kan rengöras med en mild tvällösning på en lätt fuktad trasa. Eftertorka med en torr duk.
- Starka kemikalier, alkohol, fetter och andra skarpa substanser får inte användas vid rengöring eller kontakt med delarna i produkt-kitet.
- Produkten måste kopplas från eluttaget innan rengöring.
- Efter rengöring, kontrollera att produkten fungerar korrekt genom att göra ett testlarm till larmcentralen.

Säkerhetsinfo

- Läs instruktionerna före användning.
- Testa alltid systemet enligt anvisningarna före användning och testa alltid produkten efter att justeringar har gjorts.
- Produkten passar inte alltid för alla användare.
- Produkten skall inte ses som ersättning för vårdgivarens rutinmässiga övervakningsrutiner och får inte användas i situationer där ett dröjsmål av erforderlig assistans kan innebära en potentiellt livsfarlig omständighet.
- Våra enheter är INTE avsedda för livsuppehållande utrustning, där ett eventuellt tekniskt fel kan resultera i allvarliga skador eller dödsfall.

- Kontrollera enheten regelbundet och ersätt om nödvändigt.
- Integrera inte med andra system än angivna i denna dokumentation.
- Produkten orsakar inte elektromagnetisk strålning under normala förhållanden.
- Produkten kan placeras nära andra produkter eller enheter så länge vibrationer undviks.
- Ta ut batterierna ur enheten om den inte skall användas eller förvaras under en längre tid.

Återvinning

Då produkten är slutförbrukad vänligen återlämna den till avsedd återvinningsstationer i närheten. För information om hur att kassera eller återvinna produkten kontakta de lokala myndigheterna eller Electronics Industries Alliance (EIA, www.eiae.org). I EU innebär symbolen med soptunnan att produkten inte får slängas med hushållsavfall. Den skall deponeras vi lämplig anläggning för återvinning eller returneras till återförsäljaren eller NEAT Electronics.

Tekniska Data

Mått	34 x 42 x 15 mm	
Vikt (inkl. batteri)	14 g	
Arbetsfrekvens	EU	US
	869.2 MHz (Sociala larm) Kategori 1	916.2 MHz
Batterilivslängd	> 5 år	
IP Klass	IP67	
Arbetstemperatur	+5- +55 °C	

www.neat-group.com/se